

لزنملا يف تانيعل اعمج تاوداً ةعومجم تاميلعت

مهم !

هذه عابتا مدع يدؤيس
ضفرى لى تاميلعتلا
كتنيع

سجل مجموعة الأدوات هذه على
LifeLabs.com/COVIDkit

1

احجز موعداً لجمع العينة تحت إشراف
فني مدرب

2


ملحوظة: سيتم رفض العينات التي تم
جمعها من دون إشراف. ينبغي أن يكون
عمرك 16 عامًا أو أكثر لتقوم بجمع العينة
من فتحتي الأنف/الفم بنفسك.

3

تعليمات جمع العينات والتعامل معها

جمع عينة فتحتي الأنف الأماميتين/الفم معاً


تهدف تعليمات الجمع التالية إلى مساعدتك على جمع عينة فتحتي الأنف
الأماميتين/الفم معاً من أجل اختبار كوفيد-19 خلال موعد جمع العينة الافتراضي الخاص
بك. قبل موعد الإشراف على جمع العينة، يرجى قراءة التعليمات بعناية.
قد يكون من المفيد استخدام المرآة في أثناء جمع العينة.

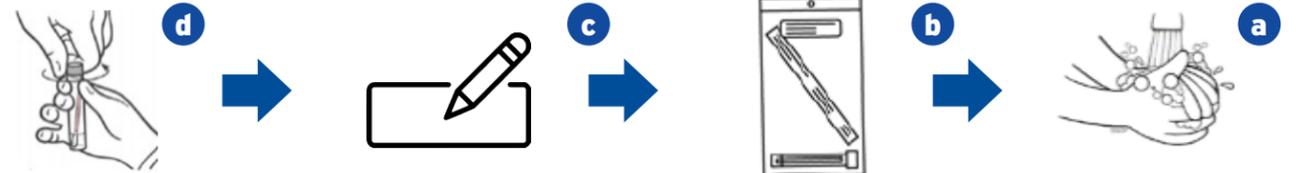


اغسل يديك بالماء والصابون
وجففهما جيداً.
احصل على مجموعة أدوات جمع عينة فتحتي
الأنف الأماميتين/الفم. تأكد من أن أنبوب
الجمع يحتوي على سائل وأن السائل ليس
معكراً بشكل واضح.
اكتب اسمك الكامل وتاريخ
ميلادك وتاريخ جمع العينة
ووقته على الملصق ثم أصقه
على الأنبوب.

تعليمات تغليف العينة


4

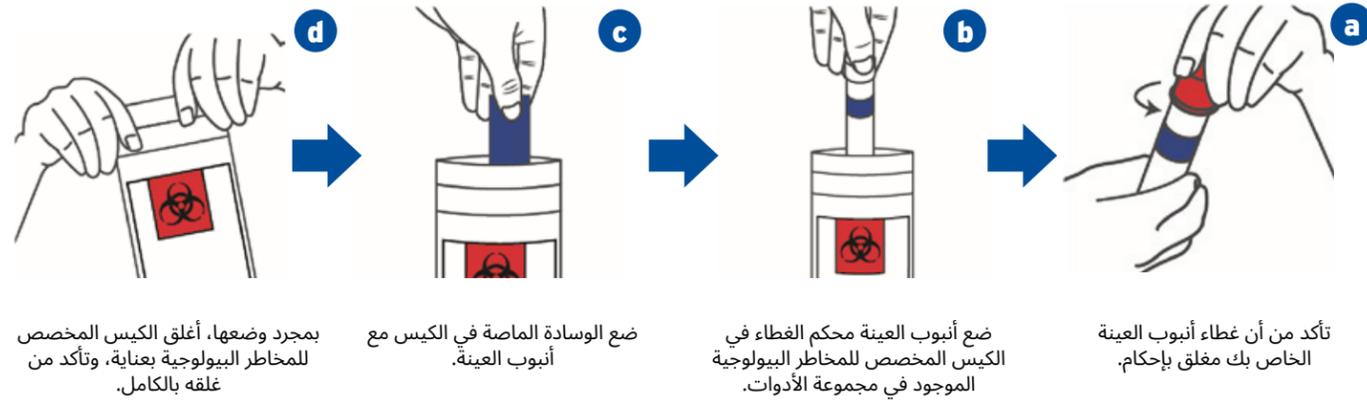


تأكد من أن غطاء أنبوب العينة
الخاص بك مغلق بإحكام.
ضع أنبوب العينة محكم الغطاء في
الكيس المخصص للمخاطر البيولوجية
الموجود في مجموعة الأدوات.
ضع الوسادة الماصة في الكيس مع
أنبوب العينة.
بمجرد وضعها، أغلق الكيس المخصص
للمخاطر البيولوجية بعناية، وتأكد من
غلقه بالكامل.

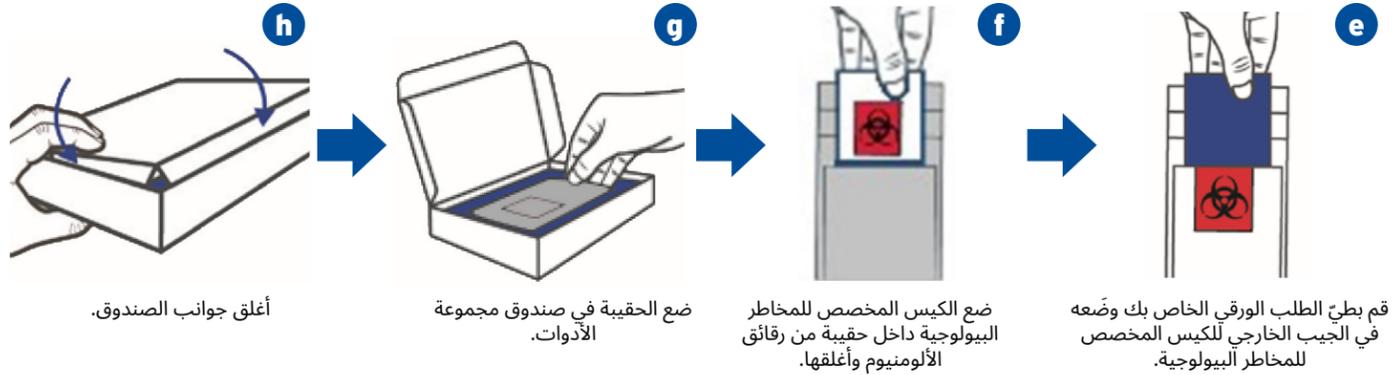


قم بطي الطلب الورقي الخاص بك وضعه
في الجيب الخارجي للكيس المخصص
للمخاطر البيولوجية.
ضع الكيس المخصص للمخاطر
البيولوجية داخل حقيبة من رقائق
الألومنيوم وأغلقها.
ضع الحقيبة في صندوق مجموعة
الأدوات.
أغلق جوانب الصندوق.

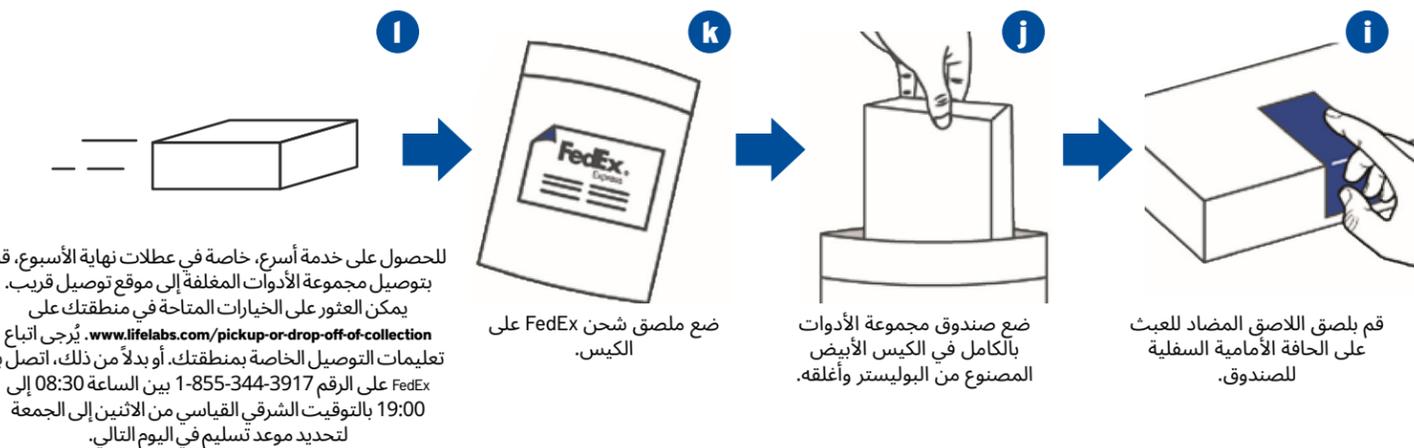


قم بلصق اللاصق المضاد للعبث
على الحافة الأمامية السفلية
للصندوق.
ضع صندوق مجموعة الأدوات
بالكامل في الكيس الأبيض
المصنوع من البوليستر وأغلقه.
ضع ملصق شحن FedEx على
الكيس.
للحصول على خدمة أسرع، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، قم
بتوصيل مجموعة الأدوات المغلقة إلى موقع توصيل قريب.
يمكن العثور على الخيارات المتاحة في منطقتك على
www.lifelabs.com/pick-up-or-drop-off-of-collection. يُرجى اتباع
تعليمات التوصيل الخاصة بمنطقتك، أو بدلاً من ذلك، اتصل بـ
FedEx على الرقم 1-855-344-3917 بين الساعة 08:30 إلى
19:00 بالتوقيت الشرقي القياسي من الاثنين إلى الجمعة
لتحديد موعد تسليم في اليوم التالي.

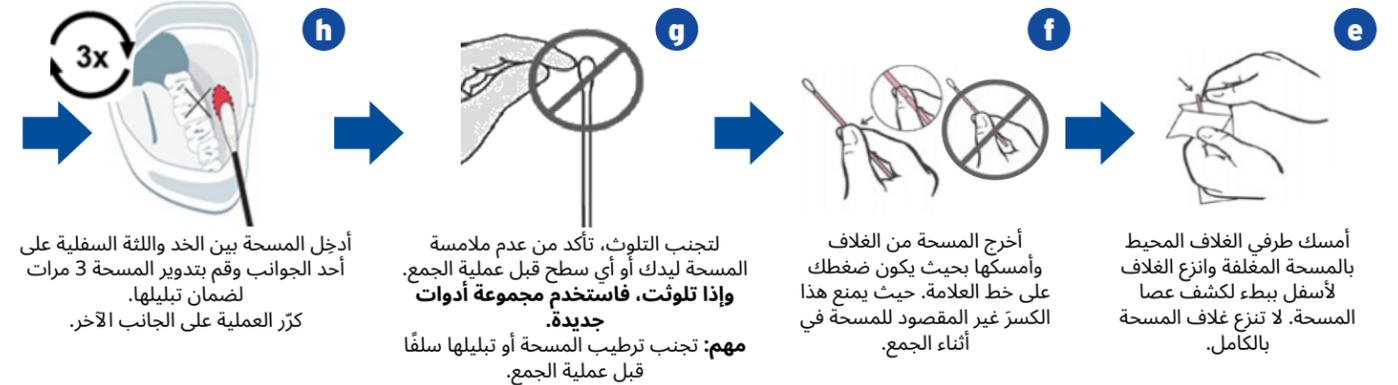

أمسك طرفي الغلاف المحيط
بالمسحة المغلقة وانزع الغلاف
لأسفل ببطء لكشف عصا
المسحة. لا تنزع غلاف المسحة
بالكامل.
أخرج المسحة من الغلاف
وأمسكها بحيث يكون ضغطك
على خط العلامة. حيث يمنع هذا
الكسر غير المقصود للمسحة في
أثناء الجمع.
لتجنب التلوث، تأكد من عدم ملامسة
المسحة ليدك أو أي سطح قبل عملية الجمع.
**وإذا تلوّثت، فاستخدم مجموعة أدوات
جديدة.**
مهم: تجنب تطهير المسحة أو تبليلها سلفاً
قبل عملية الجمع.

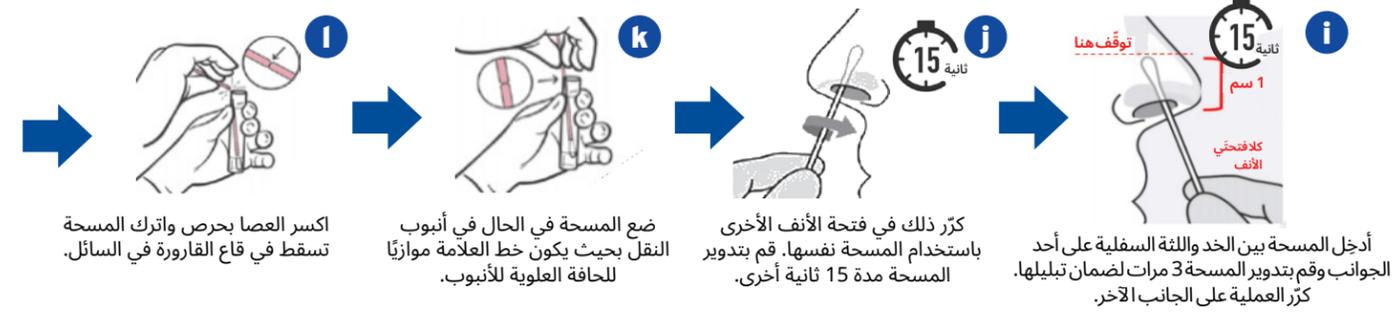

أدخل المسحة بين الخد واللثة السفلية على أحد
الجوانب وقم بتدوير المسحة 3 مرات لضمان تبليلها.
كرّر العملية على الجانب الآخر.
كرّر ذلك في فتحة الأنف الأخرى
باستخدام المسحة نفسها. قم بتدوير
المسحة مدة 15 ثانية أخرى.
ضع المسحة في الحال في أنبوب
النقل بحيث يكون خط العلامة موازياً
للحافة العلوية للأنبوب.
اكسر العصا بحرص واترك المسحة
تسقط في قاع القارورة في السائل.

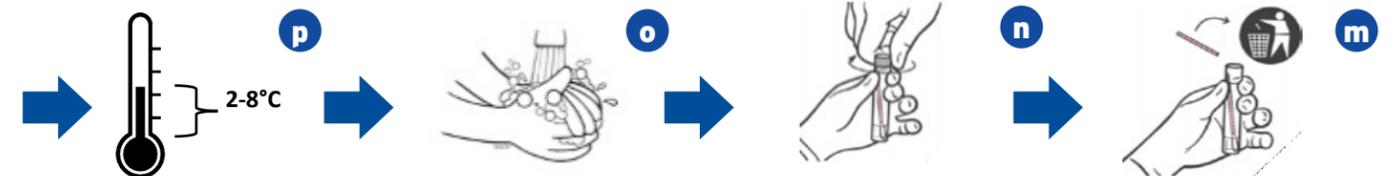

تخلص من الجزء العلوي من العصا في
القمامة العادية.
أحكم غلق غطاء الأنبوب
مهم: سيتم رفض العينات التي بها
تسريب لأسباب تتعلق بالسلامة والجودة.
اغسل يديك بالماء والصابون
وجففهما جيداً.
اتبع التعليمات الموجودة على
العبوة. احفظ الأنبوب في الثلجة
حتى موعد تسليمه.