


A

नमूना संग्रह और हैंडलिंग निर्देश संयुक्त बकल/ द्विपक्षीय पूर्वकाल नेज़ल संग्रह


निम्न लिखित संग्रह निर्देश आपको COVID-19 परीक्षण के लिए अपने दो-तरफा नाक केनमूने एकत्र करने में मदद करने के लिए हैं।

पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, और फिर सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त चरण का पालन करें।


नोट: आप एक स्वैकतर् दो-तरफा नाक से नमूना एकत्र करने के लिए 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होने चाहिए। दर्पण का उपयोग आपको एकत्र करने में सहायता कर सकता है।

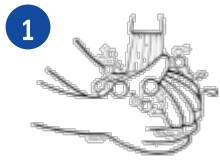


अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और अच्छी तरह से सुखाएं।

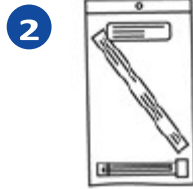


दोतरफा पूर्वकालिक नेज़ल कलेक्शन किट प्राप्त करें। सत्यापित करें कि कलेक्शन ट्यूब में तरल है और तरल पदार्थ स्पष्ट रूप से ज़ाग जैसा नहीं है।

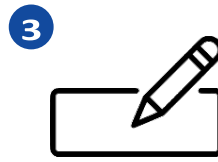


अपना पूरा नाम, जन्म तिथि और लेबल पर अपने कलेक्शन की तारीख और समय लिखें और फिर इसे ट्यूब पर संलग्न करें।

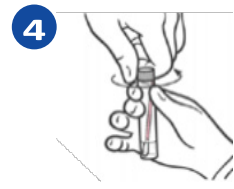


ट्यूब की कैप को खोल, इसे समतल सतह पर या किट के निर्दिष्ट भाग में दाईं ओर रखें। ट्यूब की सामग्री को फैलने नहीं देना है।

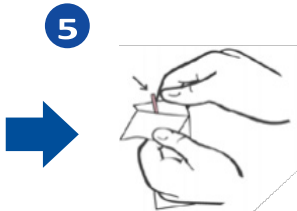


लपेटे हुए स्वेब पर रैपिंग के दोनों सिरों को पकड़ें और स्वेब हैंडल को उजागर करने के लिए रैपिंग को धीरे-धीरे उतारें। स्वेब को पूरी तरह से खोलना नहीं है।

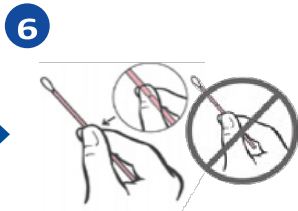


पैकेज से स्वेब निकालें और स्वेब को पकड़ें ताकि आप स्कोर लाइन को पिच कर सकें। यह कलेक्शन के दौरान स्वेब के आकस्मिक टूटने को रोक देगा।

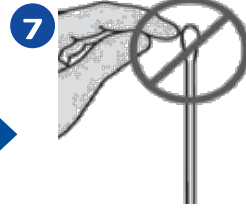


संदूषण से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि स्वेब आपके हाथ या कलेक्शन से पहले किसी भी सतह के संपर्क में नहीं आया हो। यदि दूषित है, तो एक नई किट का उपयोग करें। महत्वपूर्ण: कलेक्शन से पहले स्वेब को पूर्व-नम या पूर्व-गीला न करें।

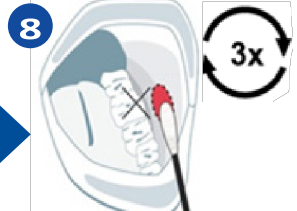


एक तरफ गाल और निचले मसूड़ों के बीच स्वाब डालें और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वाब को 3 बार घुमाएं कि स्वाब नम हो गया है। दूसरी तरफ दोहराएं।

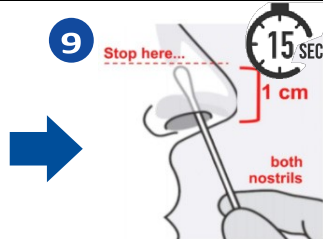


एक नथुने के अंदर 1 सेमी (0.5 इंच) तक स्वाब डालें। 15 सेकंड के लिए नथुने की आंतरिक सतहों के चारों ओर घुमाएं।

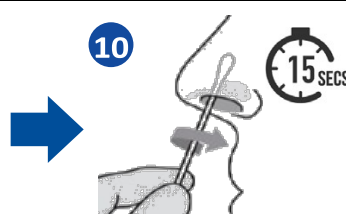


उसी स्वेब का उपयोग करते हुए, दूसरे नथुने के लिए दोहराएं। अतिरिक्त 15 सेकंड के लिए स्वेब को घुमाएं।

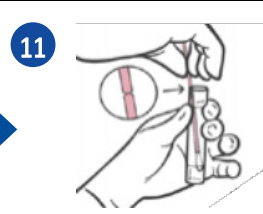


तुरंत स्वेब को ट्रांसपोर्ट ट्यूब में रखें ताकि स्कोर लाइन ट्यूब के शीर्ष किनारे के साथ लेवल हो जाए।

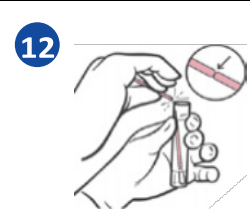


ध्यान से शाफ्ट को तोड़ें और स्वेब के तरल को शीशी के नीचे तक जाने दें।

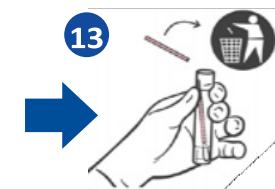


शाफ्ट के शीर्ष भाग को नियमित कचरे में फेंक दें।

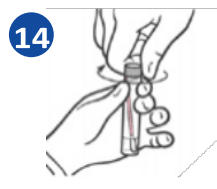

ट्यूब कैप पर सुरक्षित रूप से स्क्रू करें महत्वपूर्ण: सुरक्षा और गुणवत्ता कारणों से लीक होने वाले नमूनों को खारिज कर दिया जाएगा।

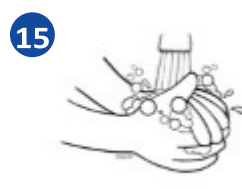

अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और अच्छी तरह से सुखाएं।

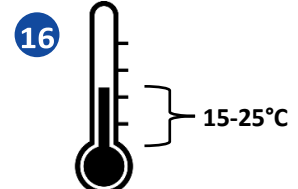

कमरे के तापमान पर ट्यूब को स्टोर करें, और अपने नमूने की पैकेजिंग के लिए निर्देशों का पालन करें।

आपके नमूने की पैकेजिंग के लिए निर्देश



जांचें कि आपके नमूने वाली ट्यूब पर कैप कसकर लगाया गया है।




आपकी किट में पाए जाने वाले बायोहाज़र्ड बैग में नमूने वाली ट्यूब सुरक्षित रूप से कैप लगा कर रखें।




अपनी सैंपल ट्यूब के साथ बैग में शोषक पैड रखें।



एक बार रखे जाने के बाद, ध्यान से बायोहाज़र्ड बैग को सील करें, और यह सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से सील हो

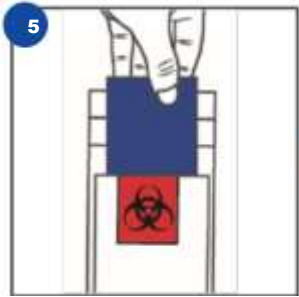


आपके कागज को आवश्यकता अनुसार मोड़ें और इसे बायोहाज़र्ड बैग की बाहरी जेब में डालें।

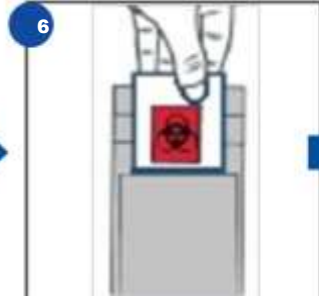

बायोहाज़र्ड बैग को फ़ॉइल पाउच में रखें और इसे सील करें।




फ़ॉइल पाउच को अपने किट बॉक्स में रखें।

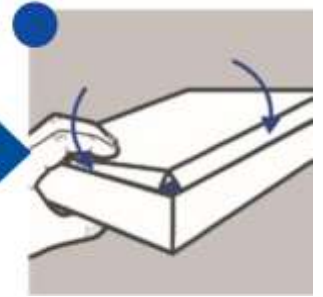

बॉक्स पर फ़्लैप को बंद करें।



बॉक्स के निचले अगले हिस्से पर टैम्पर प्रूफ़ सील को लगाएं।

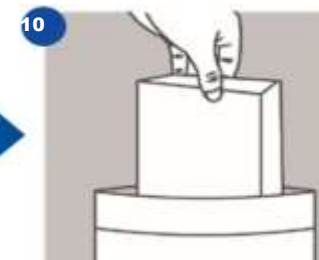

पूरे किट बॉक्स को पॉली व्हाइट बैग और सील में रखें।



बैग पर FedEx शिपिंग लेबल लगाएं।



1-800-GoFedEx पर पिकअप के लिए FedEx से संपर्क करें। नोट: आपके होम कलेक्शन किट को ड्रॉप बॉक्स या FedEx (एफ़एएससी) स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है।