

患者须知

大便采集说明

您已获提供以下一个或多个容器：


- 粪便培养与运送培养基：Cary Blair（粉红色液体）
- 寄生虫和寄生虫卵与运送培养基：SAF 固定剂（透明液体）
- 干净小瓶（无液体）

请装满所有容器。请勿倾倒容器内已有的液体。

警告：液体有毒，切勿摄入。



1 如有需要，请用马桶排尿。

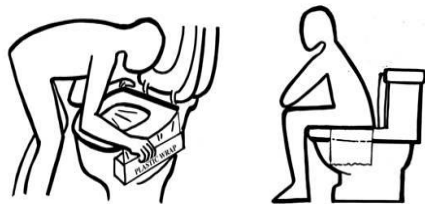

2 保鲜膜

抬起马桶座圈。将多张保鲜膜（例如 Saran Wrap™ 牌）贴在马桶上，让中间轻微凹陷。放下马桶座圈。将粪便排至保鲜膜上。




3 另亦可使用干净碗或消毒过的便盆。切勿让尿液或水接触粪便样本。



4 使用瓶盖上随附的小勺，将大便中带血或粘稠/白色（粘液）的部分（如有）装入容器中。请勿过度填充容器。

注意：请在排便后 30 分钟内将粪便装入收集容器。

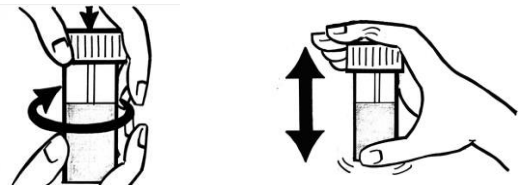

5 含液体的容器：
装入 2-3 勺粪便，直到液体达到“满位线 (FILL LINE)”。**拧紧瓶盖并摇匀。**

干净的空容器：
装入粪便至“满位线 (FILL LINE)”。**拧紧瓶盖。**



6 用肥皂和水清洗双手。
在每个容器上，写上姓名、出生日期或医疗保健卡编号，以及采集日期和时间。
将容器放入塑料袋并密封。



7 在采集后 24 小时内将容器带回实验室。延迟提交可能会影响检测结果。在样本送达实验室之前，请冷藏保存。