

Instrucciones para el paciente

Instrucciones para la recolección de heces

Se le han proporcionado uno o más de los siguientes recipientes:


- Medio de transporte de cultivo de heces: Cary Blair (líquido rosa)
- Medio de transporte para examen de huevos y parásitos: SAF Fixative (líquido transparente)
- Frasco vacío (sin líquido)

Llene todos los recipientes provistos. No deseche el líquido.

Atención: el líquido es tóxico. No lo ingiera.



1 Orine en el inodoro si lo necesita.

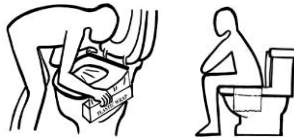

2

FILM TRANSPARENTE

Levante el asiento del inodoro. Coloque láminas de plástico (p. ej., Saran Wrap™) sobre la taza, de forma que quede una ligera depresión en el centro. Baje el asiento. Expulse las heces sobre el plástico.



3


Como alternativa, utilice un recipiente limpio o una bacinilla esterilizada. Evite que la muestra fecal entre en contacto con orina o agua.



4

Con la cuchara que se encuentra en la tapa, coloque las zonas con sangre o las áreas viscosas/blancas (mucosidad) de las heces (si las hay) en el (los) recipiente(s). No llene en exceso el (los) recipiente(s).

Nota: coloque las heces en el (los) recipiente(s) de recolección dentro de los 30 minutos posteriores a la defecación.

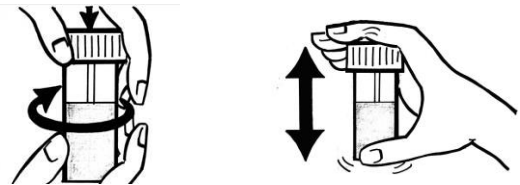

5

Recipiente(s) con líquido:

Añada 2 o 3 cucharas de heces hasta que el líquido llegue a la línea de llenado. Cierre bien la(s) tapa(s) y agite para mezclar el contenido.

Recipiente limpio y vacío:

Coloque las heces en el recipiente hasta la línea de llenado. Cierre bien la tapa.



6

Lávese las manos con agua y jabón.

Escriba su nombre, fecha de nacimiento o número de tarjeta sanitaria, y la fecha y hora de recolección en cada recipiente.

Coloque el (los) recipiente(s) en una(s) bolsa(s) de plástico y ciérrela(s).



7

Lleve el (los) recipiente(s) al laboratorio dentro de las 24 horas después de la recolección. La demora puede afectar los resultados de las pruebas. Hasta que pueda llevar las muestras al laboratorio, consérvelas refrigeradas.